


Gebrauchsanweisung

kontina

aid.002

Sprachversion:
DE

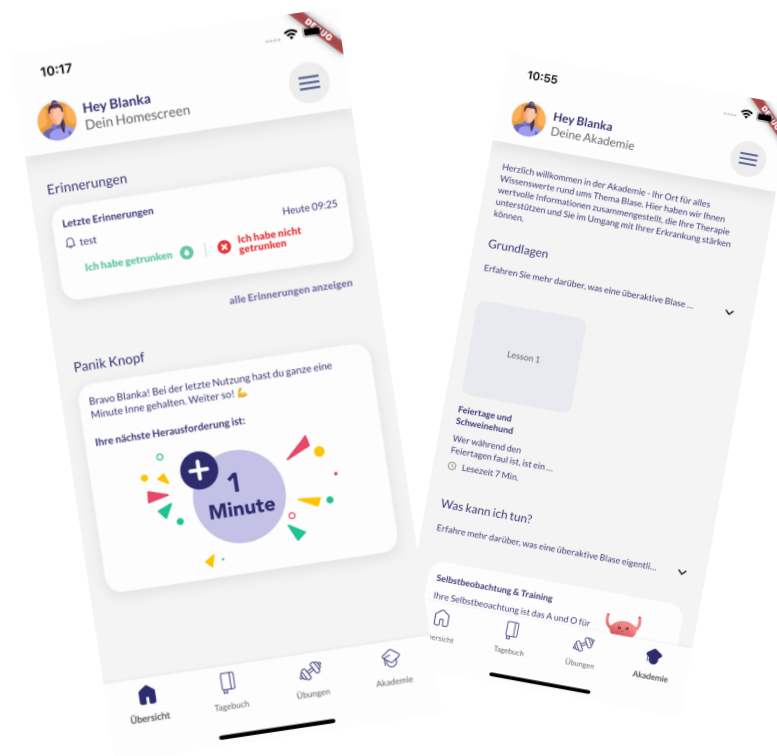



eGA

**Wichtig! Gebrauchsanweisung beachten,
elektronische Gebrauchsanweisung (eGA)**

Version der Gebrauchsanweisung:
I002-R001-C-20221021

Software Version

kontina Version 1.1.0



DE 24.10.2022



aidhere GmbH
ABC-Straße 21
20354 Hamburg
Deutschland



Medizinprodukt



Medical Device Regulation 2017/745



04260725520023

Basic UDI-DI 426072552kontina11XV

1. Inhalt

1. Inhalt	3
1. Information zur Gebrauchsanweisung	5
1.1 Kontaktdaten des Herstellers	5
1.2 Version der Gebrauchsanweisung	5
1.3 Geltungsbereich	5
1.4 Weiterführendes Informationsmaterial	5
1.5 Glossar	6
1.6 Darstellungskonventionen, Legende	6
2. Wichtige Sicherheitshinweise	8
2.1 Empfohlene Updates	8
2.2 Meldepflicht	9
3. Auf dem Produkt und der Kennzeichnung verwendete Symbole	10
3.1 In der kontina Anwendung (App) angewandte Symbole	10
4. (Medizinische) Zweckbestimmung	12
4.1 Indikation	12
4.2 Voraussetzungen	12
4.3 Kontraindikationen	12
4.4 Vorgesehene Nutzungsumgebung(en)	12
4.5 Dauer und Häufigkeit der Nutzung	13
5. Gesetzliche Bestimmungen, -Hinweise und -Konformität	14
5.1 Regulatorische Konformität	14
6. Produktbeschreibung	15
6.1 Funktionsprinzip	15
6.2 Angaben zur erwarteten Wirkung	15
6.3 Lieferumfang	16
7. Zubehör	17
8. Hardwareanforderungen	18
8.1 Android	18
8.2 Apple/iOS	19
9. Installation	20
10. Datenschutz und Datensicherheit	23
10.1 Datenschutzrechte	23
10.2 Anweisungen zum Zurücksetzen des Passworts	24

10.3 Versionsbestimmung	25
10.3.1 Benötigte Materialien/Ressourcen	26
11. Akademie nutzen	27
11.1 Einleitung	27
11.2 Benötigte Materialien/Ressourcen	27
11.3 Schritt-für-Schritt Anleitung	27
11.4 Ergebnis	28
11.5 Sicherheits- und Warnhinweise	28
12. Blasentagebuch führen	29
12.1 Einleitung	29
12.2 Benötigte Materialien/Ressourcen	29
12.3 Schritt-für-Schritt Anleitung	29
12.4 Ergebnis	31
13. Erinnerungen setzen	32
13.1 Einleitung	32
13.2 Schritt-für-Schritt Anleitung	32
13.3 Ergebnis	34
13.4 Sicherheits- und Warnhinweise	34
14. Ruheknopf	35
14.1 Einleitung	35
14.2 Schritt-für-Schritt Anleitung	35
14.3 Ergebnis	36
15. Haltetechniken erlernen	37
15.1 Schritt-für-Schritt Anleitung	37
15.2 Ergebnis	38
15.3 Sicherheits- und Warnhinweise	38
16. Vorhandene Nutzerdaten exportieren/Datenreport erstellen	39
16.1 Einleitung	39
16.2 Schritt-für-Schritt Anleitung	39

1. Information zur Gebrauchsanweisung

Bei Fragen zum Inhalt dieser Gebrauchsanweisung oder zur Anwendung des Produktes, wenden Sie sich bitte an uns als Hersteller. Eine gedruckte Version dieser Gebrauchsanweisung ist verfügbar und kann beim Hersteller kostenfrei bestellt werden. Bestellte Gebrauchsanweisungen werden binnen 7 Tagen ausgeliefert.

1.1 Kontaktdaten des Herstellers

Wenn Sie Fragen zu kontina haben, Hilfe mit der Anwendung (App) brauchen oder einen Fehler, bzw. ein Problem gefunden haben, melden Sie sich bitte bei uns unter support@kontina.com.

Sie können uns auch unter der folgenden Rufnummer erreichen:

+49 40 9999 79 21 (Mo.-Fr. von 08:00 Uhr – 18:00 Uhr)

Bei schwerwiegenden Vorfällen im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Medizinprodukts wenden Sie sich an den kontina Kundendienst und an die zuständige örtliche Behörde.

Herstelleradresse

aidhere GmbH
ABC-Straße 21
20354 Hamburg
Deutschland

<https://www.kontina.de>

1.2 Version der Gebrauchsanweisung

I002-R001-C-20221021

Die aktuelle Gebrauchsanweisung finden Sie auf unserer Webseite:

<https://kontina.com/ifu>

1.3 Geltungsbereich

Diese Gebrauchsanweisung gilt für:

- kontina v1.1.0

Die Gebrauchsanweisung gilt für die folgenden Produktvarianten:

- kontina v1.1.0 – Stand-alone




1.4 Weiterführendes Informationsmaterial

- Kurzanleitung kontina
- In-App Video-Tutorial: „Alltag mit kontina“
- Registrier-/Anmeldeformular:
www.kontina.de/registrieren

1.5 Glossar

Überaktive Blase	Unter dem Begriff überaktive Blase (auch hyperaktive Blase, früher: Reizblase oder nervöse Reizblase) versteht man eine funktionelle Störung der Blasenfunktion ohne organpathologischen Befund. Es kommt dabei zu einem nicht zu unterdrückenden Harndrang, einer gehäuften Blasenentleerung (Pollakisurie) tagsüber oder nachts mit oder ohne unfreiwilligen Urinverlust (Harninkontinenz).
Inkontinenz	Inkontinenz bezeichnet den unfreiwilligen Urinverlust, d. h. die Unfähigkeit, den Urin verlustfrei in der Harnblase zu speichern und selbst Ort und Zeitpunkt der Entleerung zu bestimmen.

1.6 Darstellungskonventionen, Legende

 Gefahr	Gefahr: eine unmittelbare Gefährdungssituation liegt vor und schwere Schäden oder Tod sind möglich
 Warnung	Warnung: mögliche Gefährdung mit schweren Schäden oder Tod als Folge
 Vorsicht	Vorsicht: mögliche Gefährdung mit leichten oder mittelschweren Schäden als Folge
HINWEIS	Hinweis: bei Bedienfehlern können Schäden am Produkt bzw. unerwartete Kosten entstehen
<i>Kursiv</i>	Kursive Schrift kennzeichnet Querverweise

Fett

Fette Schrift kennzeichnet Bedienelemente, Kontrollelemente, Schalter, Fenstertitel, Menüelemente, Funktionen, usw.

2. Wichtige Sicherheitshinweise

Um lebensgefährliche Schäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie die folgenden Hinweise.

Das kontina Programm ist ein registriertes Medizinprodukt und es wird zur Behandlung der überaktiven Blase verwendet, kann aber einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen.



Wir raten Ihnen, Ihren Arzt zu konsultieren, bevor Sie ein Programm beginnen, das zu mehr Kontinenz führen kann.

Vorsicht



Bitte benutzen Sie das Produkt bei vorliegenden Erkrankungen nur in Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt.

Vorsicht



Bitte nutzen Sie das Produkt nur in einer sicheren Umgebung.

Warnung



Bitte nutzen Sie das Produkt niemals im Straßenverkehr.

Gefahr

2.1 Empfohlene Updates

Um die sichere und optimale Verwendung der kontina Anwendung (App) sicherzustellen, ist es ratsam Software-Updates zu installieren, sobald sie zur Verfügung stehen.



2.2 Meldepflicht







Melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle (Schäden, Verletzungen, Infektionen, etc.) dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedstaats, in dem Sie wohnhaft sind. In Deutschland ist die zuständige Behörde das BfArM. Aktuelle Kontaktinformationen finden Sie auf der Webseite des BfArM: <https://www.bfarm.de>. Schwerwiegende Vorkommnisse sind im Artikel 2 Nr.65 der Verordnung (EU) 2017/745 (Medical Device Regulation; MDR) definiert.

3. Auf dem Produkt und der Kennzeichnung verwendete Symbole

Symbol	Erklärung
	Hersteller
	Herstellungsdatum
 eGA	elektronische Gebrauchsanweisung beachten
	Achtung
	CE-Zeichen (Communauté Européenne). Ein Produkt mit diesem Zeichen erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745.
	Das Produkt ist ein Medizinprodukt
	Die UDI-DI identifiziert das Produkt eindeutig gemäß EU-Verordnung 2017/745.

3.1 In der kontina Anwendung (App) angewandte Symbole

Symbol	Erklärung
	Objekt/Profil bearbeiten
	Objekt löschen

	Text veröffentlichen/sendern
	Akademie
	Tagebuch
	Ziele
	Entwicklung
	Übungen

4. (Medizinische) Zweckbestimmung

Die Smartphone-Anwendung kontina unterstützt Patienten mit überaktiver Blase durch Verhaltensschulungen und physiotherapeutische Interventionen ihre Beschwerden selbst zu lindern und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Das kontina Programm wurde für folgende Personen entwickelt:

4.1 Indikation

Patienten, bei denen die Diagnose OAB gestellt wurde (mit oder ohne Harninkontinenz, Mischinkontinenz mit dominanter OAB Symptomatik; ICD-10 codes: N32.8, N39.42)

4.2 Voraussetzungen

- Alter 18 Jahre oder älter
- physische und mentale Fähigkeit, verhaltens- und physiotherapeutische Übungen selbstständig durchzuführen
- die unter Aufsicht eines Arztes oder medizinischen Fachpersonals stehen
- fließende Deutschkenntnisse in Sprache und Schrift
- Vorhandensein eines Smartphones oder Tablets mit iOS Version 12 oder höher bzw. mit Android Version 8 oder höher und Kenntnisse in der Handhabung

4.3 Kontraindikationen

- nicht ärztlich abgeklärte/unklare Blasenfunktionsstörungen /-symptome - wie z. B. sichtbarem Blut im Urin, Verdacht auf Krebs in der Blase oder im Beckenbereich oder Verdacht auf Harntraktsteine



Vorsicht

Sollte eine dieser Beschreibungen auf Sie zutreffen, kontaktieren Sie umgehend ihre behandelnde Arztpraxis oder Ihre Hausarztpraxis und beginnen Sie **nicht** mit der Nutzung des kontina Programms, bzw. setzen Sie diese nicht fort. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie bitte den kontina-Kundendienst.

4.4 Vorgesehene Nutzungsumgebung(en)

- Die Anwendung (App) kann von Patient:innen zuhause eingesetzt werden

-
- Die Anwendung (App) kann ferner auch außerhalb des Hauses in geeigneter, ruhiger und sicherer Umgebung genutzt werden, in der die Nutzung von Smartphones erlaubt ist. Bitte beachten Sie dazu auch die folgenden Warnungen:



Nutzen Sie die Anwendung (App) niemals im Straßenverkehr!

Gefahr



Führen Sie angeleitete Bewegungsübungen der Anwendung (App) nur in sicherer, geeigneter Umgebung durch.

Stellen sie sicher, dass:

- Sie ausreichend Platz in jede Richtung haben
- der Untergrund eben und rutschsicher ist

Vorsicht

Sollten Sie Schmerzen oder Benommenheit verspüren, beenden Sie umgehend Ihr Training und ruhen sich aus.

4.5 Dauer und Häufigkeit der Nutzung

Die Anwendung wird für eine Dauer von mindestens 3 Monaten benutzt, bzw. bis die gewünschte Verbesserung der Lebensqualität eingetreten ist. Eine mehrmalige tägliche Anwendung ist zu empfehlen.

5. Gesetzliche Bestimmungen, -Hinweise und -Konformität

5.1 Regulatorische Konformität

Das Produkt erfüllt die Anforderungen folgender Gesetze und Normen:

- Medical Device Regulation 2017/745
- IEC 82304-1:2016
- IEC 62304:2006 + A1:2015
- IEC 62366-1:2020
- ISO 14971:2019
- ISO 15223-1:2021



Medical Device Regulation 2017/745

6. Produktbeschreibung

6.1 Funktionsprinzip

Um eine langfristige, anhaltende Verbesserung der OAB Symptomatik zu erreichen, zielt die Anwendung (App) darauf, das gesundheitsrelevante Verhalten der Patient:innen zu verändern. Durch eine Kombination verschiedener Verhaltensänderungstechniken werden Patient:innen in der Veränderung ihrer Gewohnheiten in Bezug auf Trink- und Toilettenverhalten unterstützt, um so langfristig ihre Lebensqualität zu verbessern.

Die Nutzung kann in die folgenden Bereiche unterteilt werden:

- **Veränderung (Selbstbeobachtung, Zielsetzung und -erreichung):** Als Teil des Veränderungsprozesses führt die Anwendung (App) die Patient:innen in eine Selbstbeobachtungsphase, in welcher sie ein Blasentagebuch führen. Dies erfolgt durch Erfassen der Flüssigkeitsaufnahme sowie Harnabgabe (Uhrzeit und Menge). Darüber hinaus werden über die Nutzung des Ruheknopfs die Drangepisoden der Patient:innen erfasst. Die Ergebnisse werden dabei auf täglicher Basis dargestellt, um so die Auswirkungen der einzelnen Entscheidungen für den jeweiligen Erfolg sichtbar zu machen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Setzen von Erinnerungen an Flüssigkeitsaufnahme und Toilettengänge. Hierdurch werden die Patient:innen beim Aufbau eines regelmäßigen Rhythmus unterstützt.
- **Halteübungen:** Die zur Verhaltensänderung notwendigen Haltetechniken werden als progressiver Übungsplan bereitgestellt sowie mittels des "Ruheknopfs" in der akuten Drangsituation.
- **Wissensvermittlung (E-learning):** Die zur Verhaltensänderung notwendigen Informationen und Konzepte werden im Rahmen von E-learning Einheiten vermittelt. Dabei werden die Themen "medizinische Grundlagen der überaktiven Blase", "Beckenboden" sowie "gesunder Lebensstil" abgedeckt. Patient:innen können sich auf diese Weise im (teilweise geführten) Eigenstudium das notwendige Wissen aufbauen.

6.2 Angaben zur erwarteten Wirkung

1. Die Softwarelösung unterstützt Patienten mit überaktiver Blase (OAB) bei der leitliniengerechten Durchführung von verhaltenstherapeutischen sowie physiotherapeutischen Interventionen und hilft so, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.
2. Darüber hinaus verbessert sich durch die Nutzung des Programms die OAB-Symptomatik, wie die Anzahl der Drangepisoden, die Anzahl der Inkontinenzepisoden sowie die Miktionsfrequenz.

6.3 Lieferumfang

- Gebrauchsanweisung
- kontina Anwendung (App) für Android/ iPhone

7. Zubehör

Im Rahmen des kontina Programms wird kein Zubehör benötigt.

8. Hardwareanforderungen

kontina kann installiert werden auf Mobiltelefonen mit dem Android Betriebssystem oder dem iOS Betriebssystem. Sofern kontina auf einem Mobiltelefon mit dem Android Betriebssystem installiert werden soll, ist es erforderlich die Playstore-App auf dem Telefon installiert zu haben.

 <p data-bbox="300 763 432 797">Vorsicht</p>	<p>Es ist zwingend notwendig, eine offizielle Version eines iOS oder Android Betriebssystems mit den entsprechenden Versionen der Stores (Apple Store oder Play Store) zu nutzen. kontina kann nur über die offiziellen Stores installiert werden und nicht über alternative Plattformen. Zum einen aus Sicherheitsgründen, weil wir dort beispielsweise Updates nicht zuverlässig administrieren können oder auch nur die unbeeinträchtigte Auslieferung der App garantieren können, zum anderen aber auch weil wir einzelne Services der Stores benötigen. Beispielsweise benötigen wir auf Android die Möglichkeit sogenannte Push Notifications an unsere Nutzer zu verschicken. Eine Bereitstellung der App über apk pure oder andere Kanäle ist deswegen leider nicht möglich.</p>
--	--

8.1 Android

Die kontina Anwendung ist mit Android Geräten der Softwareversion Oreo (Version 8.x) aufwärts kompatibel und wurde erfolgreich getestet auf folgenden marktüblichen Geräten:

- Samsung: GALAXY A7, GALAXY A10, GALAXY A10s, GALAXY A20, GALAXY A30, GALAXY A50, GALAXY A70, GALAXY J4+, GALAXY J5, GALAXY J5 Prime, GALAXY J6, GALAXY J6+, GALAXY J7, GALAXY S9, GALAXY S10
- Google: Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4
- Huawei: P30, P30 Pro, P30 Lite Dual SIM, Mate 10 Pro
- Xiaomi: MI Note 10
- Sony: Xperia XZ1 Compact

Diese Liste wird ständig erweitert, auch auf weiteren Geräten die die Softwareversion „Oreo“ (8.x) oder später nutzen sind keine Probleme bei der Nutzung zu erwarten. Sollten Sie Fragen zur Kompatibilität haben oder ein Problem bei der Nutzung haben kontaktieren Sie uns bitte unter support@kontina.com.

8.2 Apple/iOS

Die kontina Anwendung ist mit Apple Geräten der Softwareversion iOS 12.x aufwärts kompatibel und wurde erfolgreich getestet auf folgenden marktüblichen Geräten:

- Apple: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13


Sollten Sie Fragen zur Kompatibilität haben oder ein Problem bei der Nutzung haben kontaktieren Sie uns bitte unter support@kontina.com.

9. Installation


Suchen Sie im Google Play Store oder Apple Store die kontina-App




Klicken Sie auf die Installationsoption

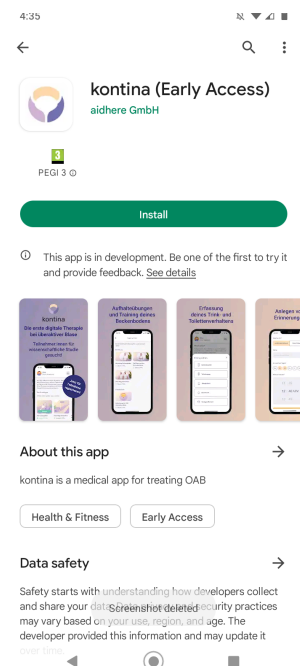

Öffnen Sie die App und
klicken Sie "Jetzt loslegen"

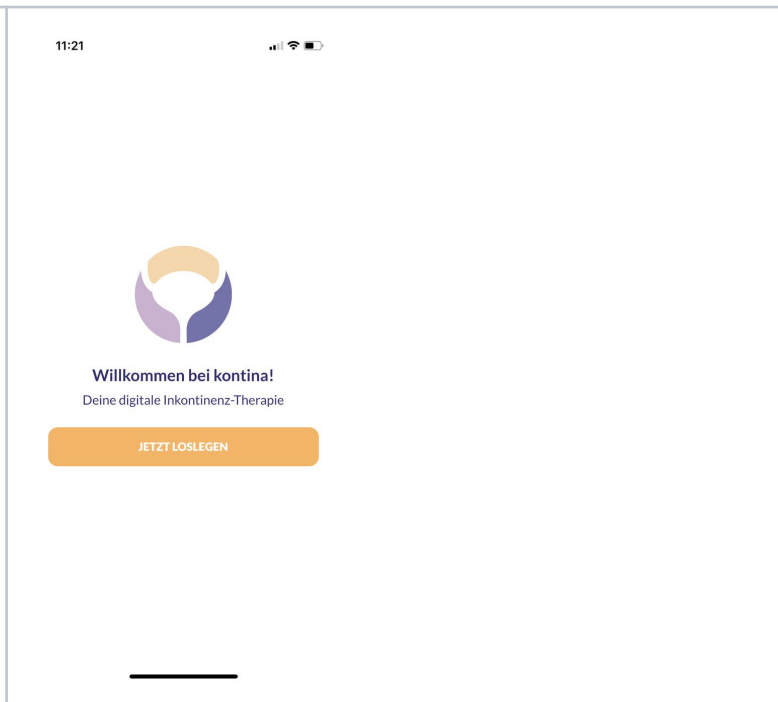

Klicken Sie "Jetzt
registrieren"

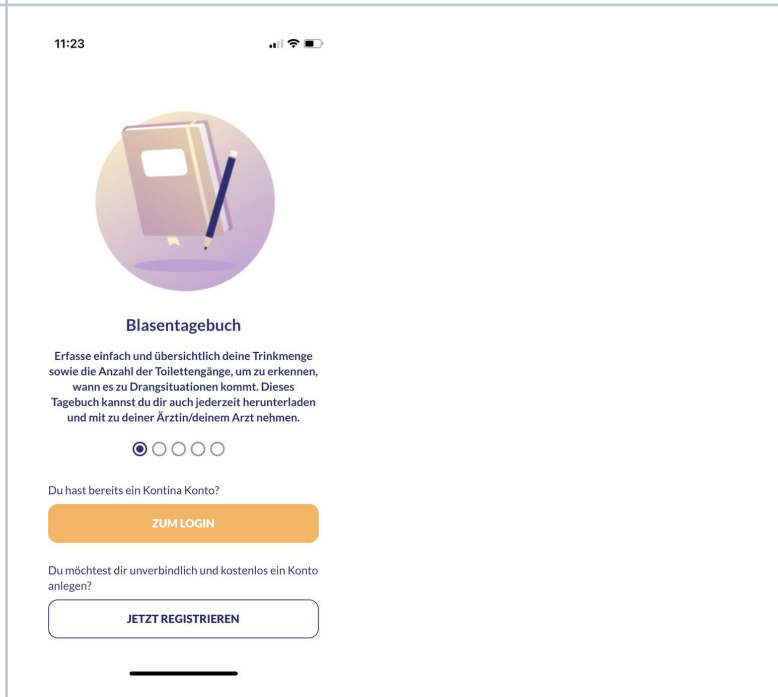

Registrieren Sie sich bei kontina und bestätigen Sie Ihre E-Mail Adresse

14:37 📶 🔋

< Jetzt registrieren

Jetzt kostenlos und unverbindlich Nutzerkonto anlegen

E-Mail*

Passwort*


Passwort wiederholen*

Ich bin einverstanden, dass die aidhere GmbH meine bei der Registrierung und während der Nutzung der App gemachten Angaben einschließlich Informationen zu meiner Gesundheit zur Bereitstellung der App verarbeitet. Beim Einsatz eines Coaches erhält dieser ebenfalls Zugang zu meinen Informationen.*

Die aidhere GmbH darf Informationen über mein Nutzungsverhalten in der App verarbeiten und pseudonymisiert mit dem von mir in der App erfassten Datum "Inkontinenz" zusammenführen, um die App-Nutzer zu reaktivieren und die App

Klicken Sie auf dem nächsten Screen "Zum Login".

11:23 📶 🔋



Blasentagebuch

Erfasse einfach und übersichtlich deine Trinkmenge sowie die Anzahl der Toilettengänge, um zu erkennen, wann es zu Drangsituationen kommt. Dieses Tagebuch kannst du dir auch jederzeit herunterladen und mit zu deiner Ärztin/deinem Arzt nehmen.

● ○ ○ ○ ○

Du hast bereits ein Kontina Konto?


ZUM LOGIN

Du möchtest dir unverbindlich und kostenlos ein Konto anlegen?


JETZT REGISTRIEREN

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen an (der angegebenen E-Mail-Adresse).

Verwenden Sie Ihr Login-Passwort zur Anmeldung.

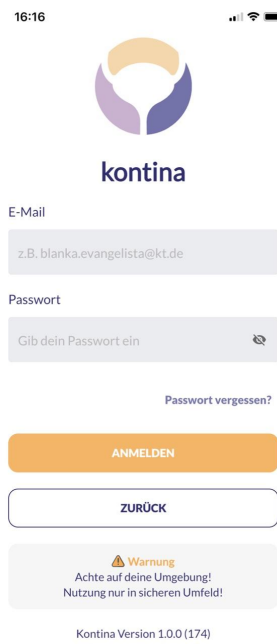

16:16



kontina

E-Mail

z.B. blanka.evangelista@kt.de

Passwort

Gib dein Passwort ein

[Passwort vergessen?](#)


ANMELDEN

ZURÜCK

⚠️ Warnung
Achte auf deine Umgebung!
Nutzung nur in sicheren Umfeld!

Kontina Version 1.0.0 (174)

Schalten Sie die Anwendung durch die Eingabe eines Rezept-Codes in der App frei

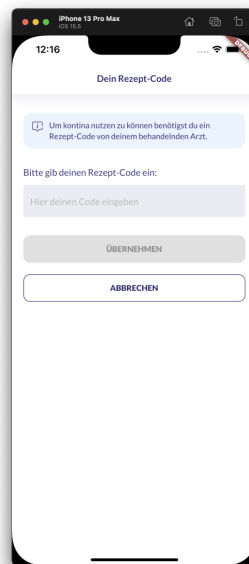

12:16

Dein Rezept-Code

Um Kontina nutzen zu können benötigst du ein Rezept-Code von deinem behandelnden Arzt.

Bitte gib deinen Rezept-Code ein:

Hier deinen Code eingeben

ÜBERNEHMEN

ABBRECHEN



Vorsicht

Die von Ihnen gemachten Angaben im Rahmen der Registrierung zu Erkrankungen sind ein wichtiger Bestandteil der weiteren kontinua Nutzung. Fehlangaben an dieser Stelle können zu falschen Empfehlungen und gegebenenfalls zu einer Gefährdung führen. Sollten Sie bestehende Erkrankungen verschweigen, könnte eine Gefährdung entstehen, da das Programm nicht für Sie geeignet sein könnte. Sollten Sie hier Fragen oder Unklarheiten haben, wenden Sie sich bitte an einen Kundendienstmitarbeiter.

10. Datenschutz und Datensicherheit

Ihre Daten werden sowohl auf Ihrem Telefon gespeichert als auch auf unseren Servern in der Open Telekom Cloud bei der Telekom Deutschland GmbH sofern Sie die kontina Anwendung öffnen während Sie Internetzugang auf Ihrem Mobiltelefon haben. Dadurch sind Ihre Daten auch bei einem Verlust oder einer Beschädigung Ihres Mobiltelefons gesichert.



Vorsicht Bitte beachten Sie zum Schutz Ihrer persönlichen Daten diese Hinweise:

Das Passwort für Ihren kontina Zugang muss mindestens 8 Zeichen lang sein und einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, eine Ziffer und ein Sonderzeichen ({}|\`~!@#\$%^&* _-+=;:","<>./?) enthalten.

- Bitte nutzen Sie das gewählte Passwort ausschließlich für kontina und nicht für weitere Anwendungen.
- Sollten Sie den Verdacht haben, jemand anderes könnte Ihr Passwort erfahren haben, ändern Sie das Passwort bitte umgehend.
- Die Anwendung (App) erlaubt Ihnen zum einfacheren Zugang ein Speichern des Passworts. Sollten Sie diese Option wählen, beachten Sie auch, dass damit jeder mit Zugriff auf Ihr Smartphone auch Zugriff auf die in der kontina Anwendung (App) gespeicherten Daten hat.

HINWEIS Um die sichere und optimale Verwendung der kontina Anwendung (App) sicherzustellen, ist es ratsam Software-Updates zu installieren, sobald sie zur Verfügung stehen.

10.1 Datenschutzrechte

Als Nutzer des Programms haben Sie die folgenden Rechte: Recht auf Auskunft, Berichtigung, Widerruf, Beschwerde, Löschung und Sperrung.

- Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten von Ihnen durch uns verarbeitet werden. Ebenso haben Sie das Recht, die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten oder deren Vervollständigung zu verlangen.
- Sie haben unter bestimmten Umständen das Recht zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden.
- Sie haben unter bestimmten Umständen das Recht zu verlangen, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt wird.
- Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung und Verwendung Ihrer Daten vollständig oder teilweise jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.


-
- Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem gängigen, strukturierten und maschinenlesbaren Format zu erhalten.
 - Auch bei Fragen, Kommentaren und Beschwerden sowie Auskunftersuchen im Zusammenhang mit unserer Erklärung zum Datenschutz und der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten können Sie sich schriftlich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
 - Sie haben auch das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstößt.

Externer Datenschutzbeauftragter
ePrivacy GmbH
vertreten durch Prof. Dr. Christoph Bauer
Große Bleichen 21, 20354 Hamburg

Zu allen Fragen und Anliegen bezüglich der Sicherheit Ihrer Daten erreichen Sie uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@aidhere.de. Sollten Sie ein besonders sensibles Anliegen haben, kontaktieren Sie unseren Datenschutzbeauftragten bitte auf dem Postweg, da die Kommunikation per E-Mail immer Sicherheitslücken aufweisen kann.


10.2 Anweisungen zum Zurücksetzen des Passworts

1. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche "Passwort vergessen?"

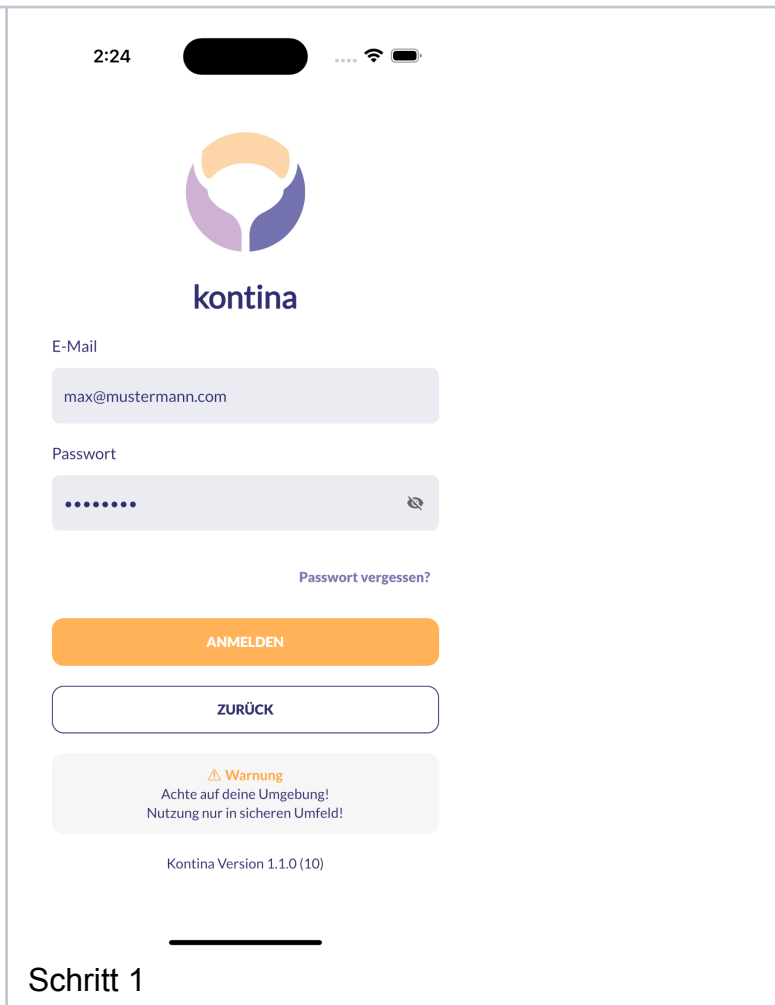


Schritt 1

2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei kontina registriert haben, und klicken Sie auf "Passwort zurücksetzen".

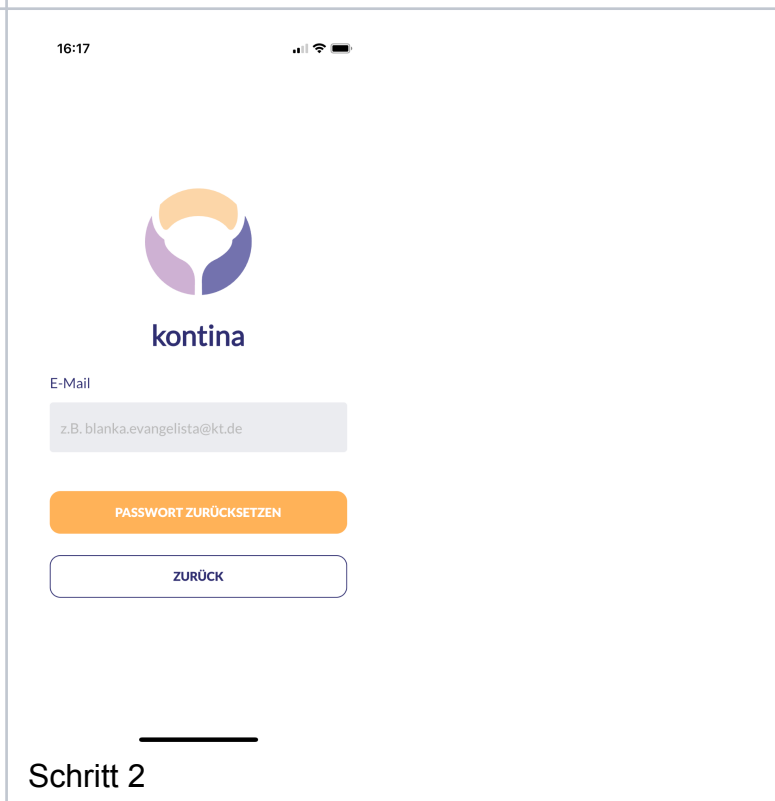

Schritt 2

3. Wir senden Ihnen eine E-Mail mit einem Link zum Zurücksetzen des Passworts. Bitte öffnen Sie folgende Seite, um Ihr neues Passwort einzugeben.

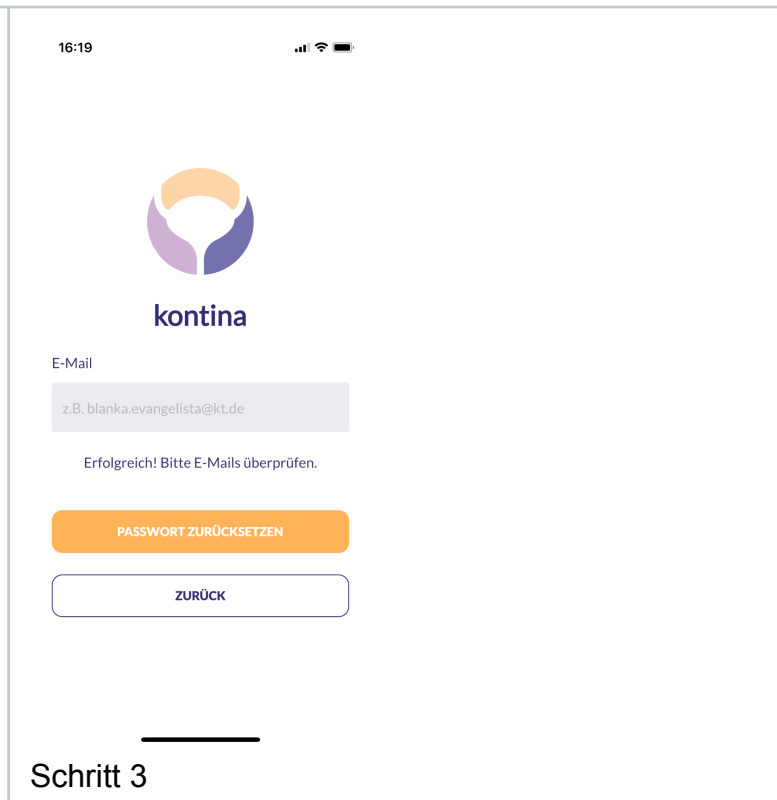

10.3 Versionsbestimmung

Dieses Kapitel beschreibt die Identifikation der Version der kontina-App innerhalb dieser.

10.3.1 Benötigte Materialien/Ressourcen


- Smartphone mit aktuellem Software-Update

1. Öffnen Sie die kontina-App	
-------------------------------	--

2. Am unteren Ende des Screens können Sie die aktuell genutzte Version der kontina-App einsehen.



3. Im eingeloggtten Zustand können Sie die Version feststellen indem Sie auf den Avatar links oben klicken.

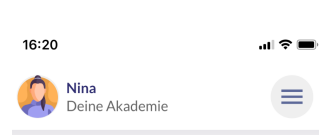

11. Akademie nutzen

11.1 Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt die Nutzung der Akademie innerhalb der kontina App. Die Akademie ermöglicht dem Nutzer eine individuelle Wissensaneignung zu gesundheitsbezogenen Themen.


HINWEIS	Die Lektionen der Akademie enthalten teilweise Video-, Audio und/oder Bildinhalte und können somit eine hohe Datennutzung mit sich bringen. Bitte beachten Sie dies beim Aufruf der Lektionen und nutzen diese beispielsweise insbesondere im Rahmen einer WLAN-Verbindung
----------------	--

11.2 Benötigte Materialien/Ressourcen

- Smartphone mit aktuellem Software-Update
- Login-Passwort zur Nutzung der kontina Anwendung (App)
- Optional: Kopfhörer zum Abspielen der Audio-Inhalte


11.3 Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Wählen Sie das Feld **"Akademie"** unten rechts.

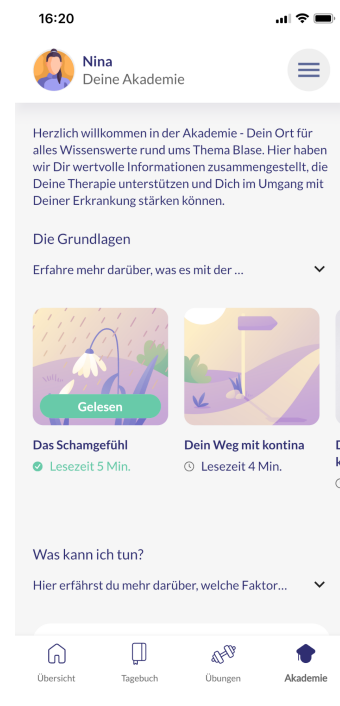

Schritt 1

2. Wählen Sie aus einem der vorgeschlagenen Kurse aus.
3. Die Auswahl gliedert sich dabei in den Bereich „Grundlagen“ sowie „Was kann ich tun?“.

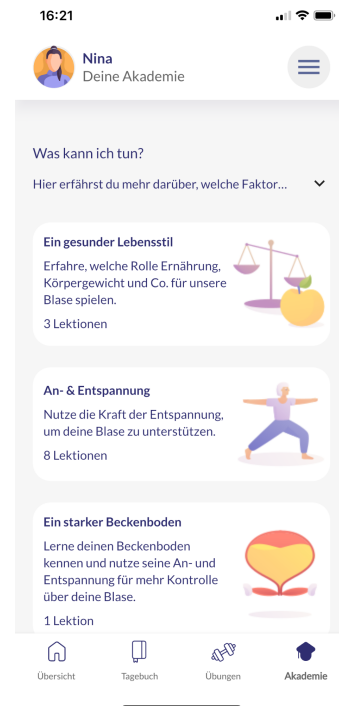

Schritt 2

11.4 Ergebnis

Nach erfolgreicher Durchführung der Schritte kann das Online-Training gestartet werden.

11.5 Sicherheits- und Warnhinweise



Vorsicht

Bitte beachten Sie bei der Ausführung eventueller Bewegungsübungen genau die gegebenen Hinweise. Die unsachgemäße Ausführung der Übung kann zu Verletzungen führen. Sollten Sie Schmerzen verspüren oder sich nicht in der Lage fühlen die Übung korrekt auszuführen, dann brechen Sie die Übung ab.

12. Blasentagebuch führen

12.1 Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt das Führen eines Blasentagebuchs innerhalb der kontina Anwendung (App). Der Nutzer bekommt dadurch die Möglichkeit sein Trink- und Toilettenverhalten zu überwachen.

12.2 Benötigte Materialien/Ressourcen

- Smartphone mit aktuellem Software-Update
- Login-Passwort zur Nutzung der kontina Anwendung (App)


12.3 Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Klicken Sie auf den Menüpunkt Tagebuch in der unteren Menüleiste, um zu Ihrem Tagebuch zu gelangen. Klicken Sie dort auf das Pluszeichen, um einen neuen Eintrag hinzuzufügen.



Schritt 1

2. Wählen Sie die Art des Eintrags aus, den Sie hinzufügen wollen.

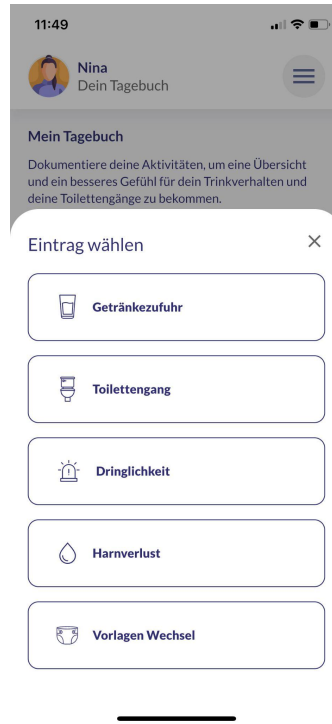


Schritt 2

3. Füllen Sie das folgende Formular aus, um einen entsprechenden Eintrag vorzunehmen.



Schritt 3

4. Überprüfen Sie auf der
Überblicksseite, ob Sie Ihren Eintrag
korrekt vorgenommen haben.

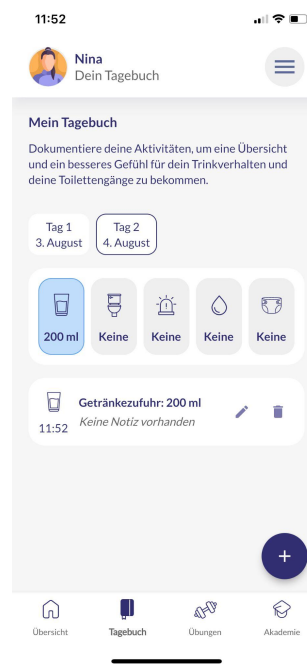

Schritt 4

12.4 Ergebnis

Nach erfolgreicher Durchführung der Schritte bekommen Sie eine Übersicht Ihres Toiletten- und Trinkverhaltens.


13. Erinnerungen setzen

13.1 Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt das Setzen von individuellen Erinnerungen an Flüssigkeitsaufnahme und Toilettengang innerhalb der kontina Anwendung (App).


13.2 Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Wählen Sie die drei waagrechten Striche oben rechts, um zum Seitenmenü zu gelangen. Klicken Sie dort auf "Erinnerungen verwalten".

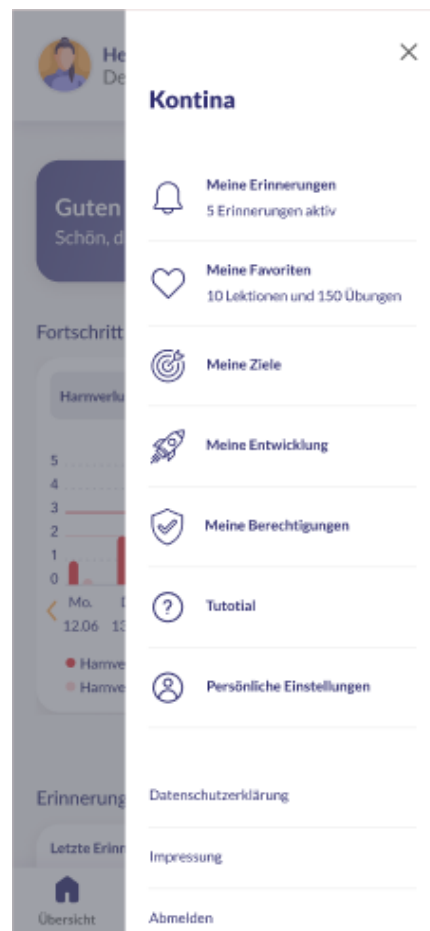

Schritt 1

2. Auf der folgenden Übersichtsseite können Sie alle bereits angelegten Erinnerungen einsehen. Durch das Klicken des Plus-Buttons unten rechts können Sie neue Erinnerungen hinzufügen.

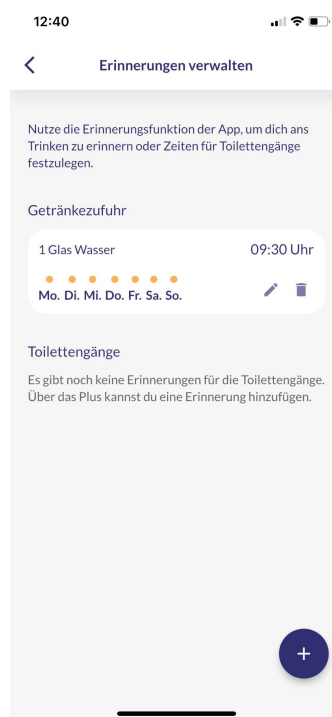


Schritt 2

3. Wählen Sie für eine Erinnerung die Art der Erinnerung aus (Getränkzufuhr oder Toilettengang) sowie die Wochentage, an denen die Erinnerung ausgespielt werden soll. Legen Sie darüber hinaus eine Uhrzeit fest sowie ggf. optional einen Titel.



Schritt 3

4. Überprüfen Sie auf der Überblicksseite, ob Sie alles korrekt anlegt haben. Über das Stift-Symbol können Sie die Erinnerung ggf. anpassen.

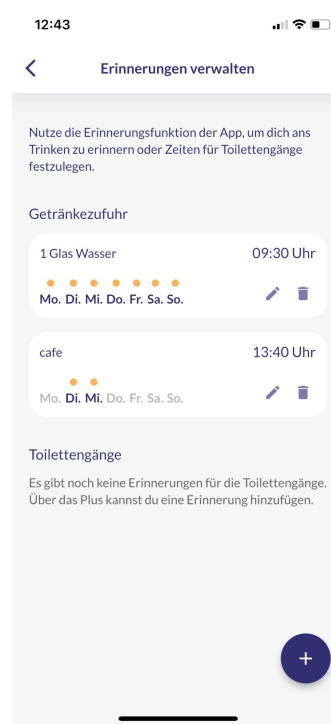

Schritt 4

13.3 Ergebnis

Nach erfolgreicher Durchführung der Schritte können Sie Ihre individuellen Erinnerungen und die Erinnerungsfrequenz festlegen.

13.4 Sicherheits- und Warnhinweise



Vorsicht

Bitte beachten Sie bei der Auswahl der Erinnerungen, dass diese für Ihre aktuelle Situation angemessen sind sowie zur Verbesserung Ihrer Gesundheit beitragen. Falsch gesetzte Erinnerungen können zu einer Gefährdung durch psychische Belastungen werden.


14. Ruheknopf

14.1 Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt das Nutzen des Ruheknopfs, um in einer akuten Drangepisode Unterstützung durch eine Haltetechnik zu erhalten und dadurch dem Harndrang länger Stand zu halten.

14.2 Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Navigieren Sie zur Startseite der App und klicken Sie dort auf die Kachel "Ruheknopf".

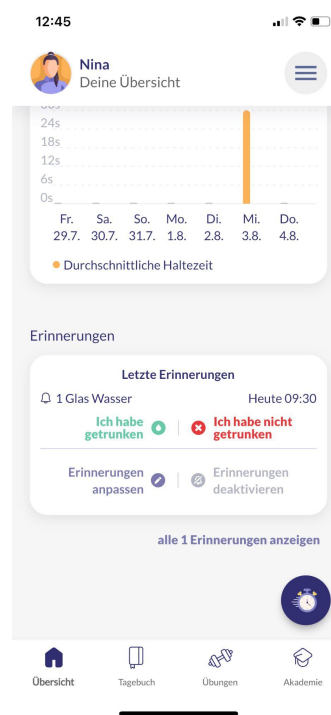


Schritt 1

2. Anschließend folgt eine Videoanleitung. Folgen Sie den Anweisungen in der Übung. Die Dauer der Übung entwickelt sich mit Ihrem Fortschritt. Falls Sie dem Harndrang nicht länger Stand halten können, klicken Sie "Ich halte es nicht durch".



Schritt 2

3. Nach Abschluss der Übung erhalten Sie eine Information über die Dauer der nächsten Übung.

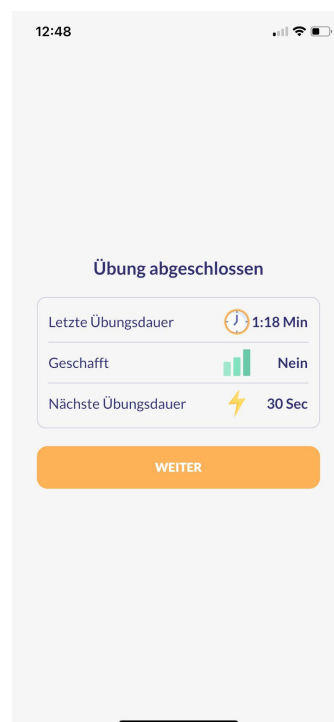

Schritt 3

14.3 Ergebnis

Nach erfolgreicher Durchführung der Schritte können Sie dem Harndrang mit der Zeit immer länger Stand halten.

15. Haltetechniken erlernen


15.1 Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Wählen Sie in der unteren Menüleiste “Übungen” um zum Übungsprogramm zu gelangen. Ggf. ist dies zu Beginn der Therapie noch nicht freigeschaltet, da zunächst für mindestens drei Tage ein Blasentagebuch geführt werden muss.




Schritt 1

2. Wählen Sie eine der freigeschalteten Übungen aus. Im Verlauf der Therapie werden immer weitere Übungen für Sie freigeschaltet. Durch Klicken auf einer der Kacheln unter “Dein 12-Wochen-Programm” gelangen Sie zur Liste der Übungen der jeweiligen Woche.

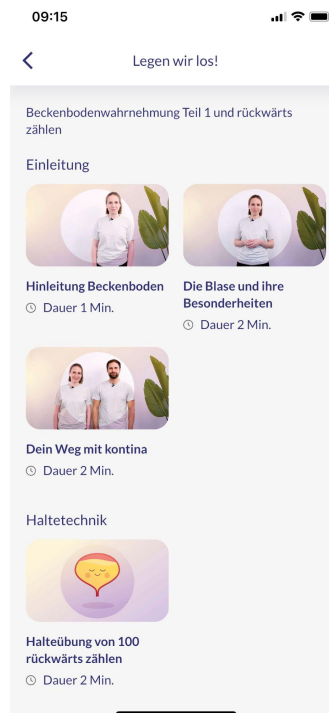


Schritt 2

3. Klicken Sie eine der Übungen an, um das entsprechende Trainingsvideo zu starten.

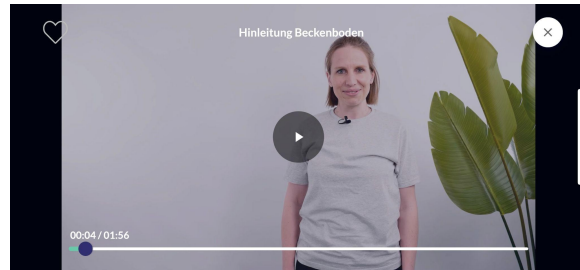

Schritt 3

4. Folgen Sie den Anweisungen im Video.

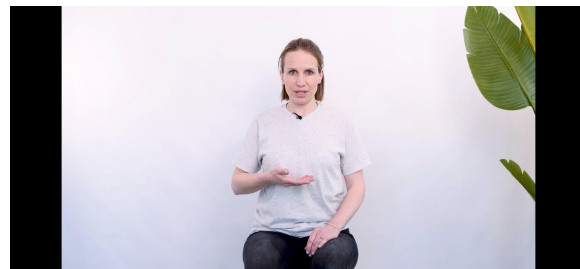

Schritt 4

15.2 Ergebnis

Wenn Sie die Übungen regelmäßig erfolgreich durchführen, können Sie Ihre Blase besser kontrollieren und sich besser in der Drangepisode entspannen.

15.3 Sicherheits- und Warnhinweise



Bitte achten Sie beim Durchführen der Übungen auf die korrekte Ausführung, wie im Video angeleitet, um Verletzungen vorzubeugen.

Vorsicht


16. Vorhandene Nutzerdaten exportieren/Datenreport erstellen

16.1 Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die im Rahmen der Nutzung gespeicherten Informationen aus dem Blasentagebuch abrufen und exportieren können. kontina bietet Ihnen hierfür die Möglichkeit einen pdf report zu erstellen, um die erfassten Daten anderweitig zu nutzen.

16.2 Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Wählen Sie die drei waagrechten Striche oben rechts.

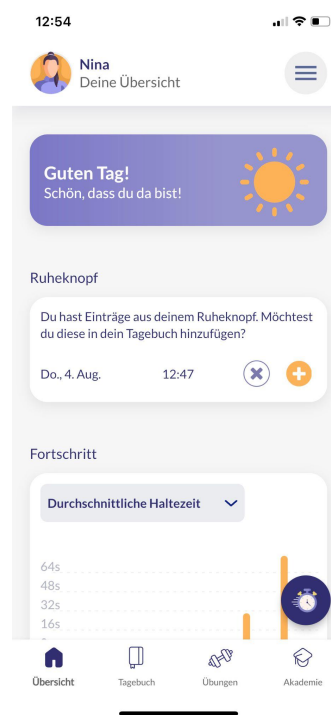

Schritt 1

2. Klicken Sie im Bereich „Hilfe“ auf „Report“



Schritt 2

kontina

- aid.002
- Version 1.1.0

Version der Gebrauchsanweisung:
I002-R001-C-20221021



Medical Device Regulation 2017/745



aidhere GmbH
ABC-Straße 21
20354 Hamburg
Deutschland

Kundendienst-Rufnummer: +49 40 9999 79 21
Servicezeiten: Mo.-Fr. von 08:00 Uhr – 18:00 Uhr